

Detector inteligente

INTELLIGENT DETECTOR

Manual de uso



● Seguridad rápida

Durante la operación, lea cuidadosamente el manual y guarde copias de Seguridad.

Descripción del producto

Este producto es un detector de temperatura que utiliza el principio de retransmisión por rayos infrarrojos.

La medición rápida y precisa de la temperatura humana sólo se logra si la frente se fija en la sonda infrarroja.

Este producto se aplica a la vigilancia rápida de la temperatura humana en lugares públicos de gran tráfico humano. Tiene ventajas como la temperatura sin contacto, alta precisión, velocidad de medición, alarma de voz hipérmica, etc., especialmente para las entradas y salidas. Puertos de entrada, puertos, aeropuertos, muelles, estaciones, oficinas, escuelas, cines, etc.

Lista de bultos




Modo de instalación

Este producto apoya tres modos de instalación: 1. Instalación de tornillo, 2. Instalación de chaleco, 3. Instalación de trípodes (por cuenta propia).




Descripción estructural

- 1 Pantalla
- 2 Sensor de luz
- 3 Detector infrarrojo
- 4 Agujero fijo
- 5 Espacio de bocina
- 6 Reducción del volumen
- 7 Aumentar el volumen
- 8 Consulta de memoria
- 9 Grados C / modo de desplazamiento
- 10 Interruptor de alimentación

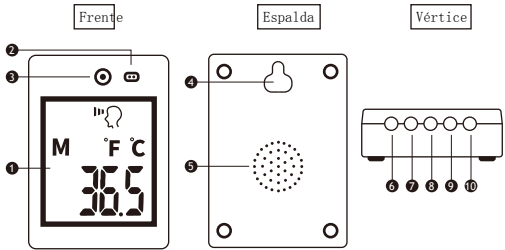

Nota de visualización

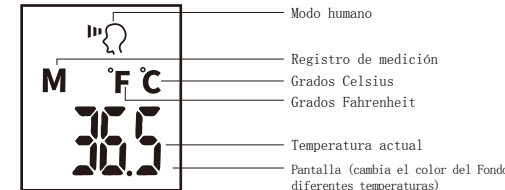

Características funcionales



Método de medición

El detector inteligente conecta la fuente de alimentación con el motor automático y presiona sobre la parte superior durante dos segundos críticos para encender / apagar el motor y terminarlo cuando se muestre el número de la pantalla.

Acercándose la frente o la mano a los pequeños agujeros de la pantalla de la máquina, el sensor de luz de la derecha tiene un pequeño parpadeo de luz roja, en cuyo momento activará automáticamente el detector infrarrojo para medir la temperatura y, en la medida de lo posible, mantener la zona objeto de la medicación. 2. En segundos, la pantalla mostrará los valores de temperatura de los seres humanos medidos y, si la temperatura está en la pantalla (32° C a 37,3° C), el color de fondo será verde y la voz "temperatura normal", si la temperatura es (37,4° C a 38° C), el color de base será naranja y la temperatura será "temperatura elevada por favor, Nueva medida", si la temperatura es (≥38,1° C),

● La distancia estándar de medición es de 10 cm, si quieres medir una distancia mayor, puedes contactar con nosotros a medida, pero el costo es relativamente mayor.

Parámetros del producto

Pantalla	Pantalla de cristal líquido
Memoria de memoria	Grupo 32.
Modo de suministro	DC5V/1A
Pista baja	≤2.5V
Trompeta	8Ω 1w
Condiciones de uso	Temperatura ambiente 10℃~40℃ Humedad relativa ≤80%
Distancia de medición	0-10cm (adaptable)
Modo térmico	32℃~42.9℃
Precisión	±0.2℃
Unidad de temperatura	Grados centígrados / grados Fahrenheit.
Mostrar retroiluminación	Verde, naranja, rojo.
Consumo	Estado del dispositivo ≤1,33 ma Estado de funcionamiento ≤1,5w
Working current	Corriente de trabajo 20 - 250 mega / espera 10 mega /
Material de producción	ABS Environmental Material
Color	Negro / gris
Tamaño exterior	10 x 80 x 27mm
Peso desnudo	0.124kg
Tamaño del paquete	155 x 140 x 45mm

Nota:

- No toques el vidrio con los dedos.
- Este producto se someterá a prueba a una temperatura ambiente de 10°C a 40°C.
- El producto debe estar limpio y seco.
- No dejes caer el producto, la protección del vidrio de la lente es la parte más frágil.
- No coloque este producto en un lugar donde haya electricidad.
- No se coloque el producto en un ambiente térmico extremo, superior o inferior a 50°C.

- Nota: el software y las versiones de hardware del producto se actualizan constantemente, por favor, sobre la base de las funciones del producto efectivamente adquirido.
- La interpretación final de este producto pertenece a la empresa.